




E A R W E A R

ADAPT

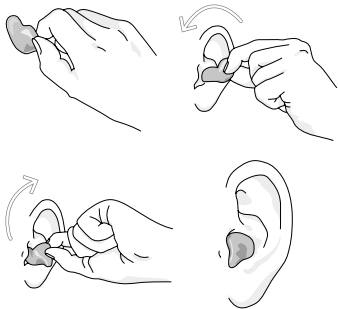

Dear customer,

please read these usage instructions attentively before using your earmould for the first time and keep them safely in the supplied storage case. They provide you with important information about your product.

Listening to music that is too loud with earphones can lead to severe hearing damage. Bear in mind that the health of your ears is very important. Protect your hearing by using earphones sensibly and limiting the volume to a safe level.

General information:

- ▶ ADAPT is a reusable, individually adjusted earplug made of flexible, skin-friendly material.
- ▶ To distinguish between the sides, the right earpiece features a dot.
- ▶ Note: When using ADAPT, acoustic perceptions of the surroundings may be restricted.

Insertion

Grasp your earpiece with the thumb and forefinger and place the cone of the earpiece into your auditory canal. Pull your earlobe downwards carefully and push the earpiece, if necessary, into the auditory canal, turning it gently. Follow the natural con-

tours of your ear. Press lightly on the earpiece to ensure it fits pleasantly in the ear.

Removal

Grasp the earpiece with your thumb and forefinger and pull it carefully so that it loosens from the auditory canal. Then remove the earpiece from your ear.

Functional interference

- ▶ Check your EARWEAR ADAPT regularly for damage. We would be happy to check whether your customised earpiece still fits perfectly.
- ▶ Do not use the earpieces if they are damaged. Please contact the manufacturer for replacements.
- ▶ To be able to ensure good wearing com-

fort/good hearing experiences, we recommend that you replace your customised earpieces at the latest after 4 years.

(Date of recommended replacement on the product label/case)

Cleaning and care

- ▶ Clean your customised earpieces carefully if dirty with mild soapy water.
- ▶ Your customised earpieces can be negatively influenced by certain chemical substances. For further information, contact the manufacturer.
- ▶ Ask your customer adviser for information about specially recommended care products.
- ▶ Please use the case provided for safe-

keeping before and after use.

Warnings

- ▶ The EARWEAR ADAPT is not hearing protection and does not provide protection against harmful ambient noise!
- ▶ Avoid listening to music with earphones at high volume for lengthy periods. Ensure that noise levels are moderate in order to protect your ears.
- ▶ Take regular breaks from listening to music to give your ears a rest and avoid potential damage.
- ▶ Please note that EARWEAR ADAPT compromises your perception of possible dangers or warning signals. When using them, therefore pay special attention to potential

dangers and warning signs in your surroundings.

- ▶ In case of pressure sores or a feeling of pressure, please check the fit of the earpieces.
- ▶ If allergic reactions occur such as reddening of the skin, itchiness etc., please discontinue use of EARWEAR ADAPT and clarify the cause with a medical consultant.
- ▶ Keep the product out of the reach of small children as it is a choking hazard!
- ▶ Sudden or rapid removal of an earpiece from the auditory canal can damage the eardrum.
- ▶ Do not remove the earpieces by tugging on the wearing strap or cable!
- ▶ In case of injury to the ear, the earpiece

may no longer be used and it is recommended to consult your medical practitioner.

- ▶ EARWEAR ADAPT should not be worn if there is a risk of the wearing strap or cable being snagged or caught during wearing.

Service and warranty

In case of a warranty claim, please contact your retailer with the receipt. The warranty terms are governed by statutory provisions. The warranty excludes damage due to improper use and non-compliance with the care instructions.

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der ersten Anwendung Ihres Ohrstücks genau durch und bewahren Sie diese in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox auf. Sie liefert Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Produkt.

Hören von zu lauter Musik mit Kopfhörern kann zu schweren Hörschäden führen. Denken Sie daran, dass die Gesundheit Ihrer Ohren von großer Bedeutung ist.

Schützen Sie Ihr Gehör, indem Sie vernünftig mit Kopfhörern umgehen und die Lautstärke auf ein sicheres Niveau begrenzen.

Allgemeines

- ▶ Der ADAPT ist ein wiederverwendbarer individuell angepasster Ohrstöpsel aus flexiblem, hautverträglichem Material.
- ▶ Zur Unterscheidung der Seiten ist das rechte Ohrstück mit einem Punkt versehen.
- ▶ Achtung: Bei der Verwendung des ADAPT kann die akustische Wahrnehmung der Umgebung eingeschränkt sein.

Einsetzen

Umfassen Sie mit Daumen und Zeige-

finger ihren Kopfhörer und Platzieren Sie den Zapfen des Ohrstücks in Ihrem Gehörgang. Ziehen Sie das Ohrläppchen vorsichtig nach unten und drücken Sie das Ohrstück, wenn nötig, unter leichtem Drehen in den Gehörgang. Folgen Sie dabei den natürlichen Konturen Ihres Ohres. Drücken Sie leicht auf das Ohrstück, um sicherzustellen, dass es angenehm im Ohr sitzt.

Entfernen

Greifen Sie mit Daumen und Zeigefinger das Ohrstück und ziehen Sie vorsichtig daran, damit es sich aus dem Gehörgang lockert. Danach entnehmen Sie den Ohrstück aus dem Ohr.

Funktionsbeeinträchtigung

- ▶ Kontrollieren Sie Ihren EARWEAR ADAPT regelmäßig auf Beschädigungen. Gerne kontrollieren wir, ob ihr maßgefertigtes Ohrstück noch perfekt sitzt.
- ▶ Verwenden Sie diese nicht, wenn diese Beschädigt sind. Für Ersatz wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- ▶ Um guten Tragekomfort/gute Klang-erlebnisse sicherstellen zu können, empfehlen wir Ihre maßgefertigten Ohrstücke nach spätestens 4 Jahren durch neue zu ersetzen.
(Datum der empfohlenen Neuversorgung auf dem Produktetikett/Etui)

Reinigung und Pflege

- ▶ Reinigen Sie Ihr maßgefertigtes Ohrstück bei Verschmutzung sorgfältig mit mildem Seifenwasser.
- ▶ Ihre maßgefertigten Ohrstücke können durch bestimmte chemische Substanzen negativ beeinflusst werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den Hersteller.
- ▶ Informieren Sie sich bei Ihrem Kundenberater über speziell empfohlene Pflegeprodukte.
- ▶ Verwenden Sie bitte zur Aufbewahrung vor und nach dem Gebrauch das mitgelieferte Etui.

Warnhinweise

- ▶ Der EARWEAR ADAPT ist kein Gehörschutz und bietet keinen Schutz gegenüber schädlichem Umgebungslärm!
- ▶ Vermeiden Sie das Hören von Musik mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärkepegel angemessen sind, um Ihre Ohren zu schützen.
- ▶ Nehmen Sie regelmäßige Pausen vom Musikhören, um Ihren Ohren Ruhe zu gönnen und mögliche Schäden zu vermeiden.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass der EARWEAR ADAPT Ihre Wahrnehmung von möglichen Gefahren oder Warnsignalen beeinträchtigt. Achten Sie deshalb bei der Verwendung besonders auf mögliche Gefahren

und Gefahrenhinweise in Ihrem Umfeld.

- ▶ Bei Druckstellen und Druckgefühl überprüfen Sie bitte den Sitz der Ohrstücke.
- ▶ Sollten allergische Reaktionen wie Hautrötungen, Jucken etc. auftreten, bitte den EARWEAR ADAPT nicht weiterverwenden und die Ursache mit einem Facharzt abklären!
- ▶ Vor Kleinkindern fernhalten, da Verschluckungsgefahr besteht!
- ▶ Plötzliches oder schnelles Entfernen eines Ohrstücks aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen.
- ▶ Entfernen Sie die Ohrstücke nicht durch Ziehen am Trageband oder Kabel!
- ▶ Bei Verletzungen im Ohr darf der Ohrstück nicht mehr verwendet werden und

es wird empfohlen den nächsten Facharzt aufzusuchen!

- ▶ Der EARWEAR ADAPT sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sich das Trageband oder Kabel während des Tragens verfängt oder mitgerissen wird.

Service und Gewährleistung

Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte mit der Rechnung an Ihren Händler. Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch und Nichteinhaltung der Pflegevorschrift zurückzuführen sind.

**Chère cliente,
cher client,**

veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant la première utilisation de votre embout auriculaire, et conservez-la dans l'étui. Elle vous donnera des informations importantes à propos du produit que vous venez d'acquérir.

Écouter de la musique à un volume trop élevé avec des écouteurs peut provoquer de graves dommages à l'audition.

N'oubliez pas que la santé de vos oreilles est d'une très grande importance. Protégez vos oreilles en utilisant les écouteurs de manière raisonnable et en limitant le volume à un niveau sûr.

Généralités

- ▶ ADAPT est un bouchon d'oreille réutilisable, adapté individuellement, et fabriqué dans une matière souple et bien tolérée par la peau.
- ▶ Pour que l'on puisse distinguer facilement les deux côtés, l'embout droit est marqué d'un point.
- ▶ Attention : lorsque vous utilisez ADAPT, votre perception acoustique de l'environnement peut être réduite.

Insérer

Prenez votre écouteur entre le pouce et l'index et placez le cône de l'embout personnalisé dans votre conduit auditif. Tirez quelque peu le lobe de l'oreille vers le bas et si nécessaire enfoncez l'embout dans le conduit auditif en le tournant légèrement. Suivez les contours naturels de votre oreille. Appuyez ensuite légèrement sur l'embout pour vous assurer qu'il est bien positionné dans l'oreille.

Enlever

Saisissez l'embout entre le pouce et l'index et tirez-le prudemment pour qu'il se desserre du conduit. Enlevez ensuite l'embout de votre oreille.

Dégradation

► Contrôlez régulièrement votre EARWEAR ADAPT pour vérifier s'il n'est pas abîmé. Nous nous ferons un plaisir de contrôler si votre embout personnalisé se positionne encore parfaitement dans votre oreille.

► Ne l'utilisez pas s'il est abîmé. S'il doit être remplacé, veuillez vous adresser au fabricant.

► Pour garantir un bon confort de port / de bons résultats sonores, nous vous conseillons de remplacer vos embouts personnalisés au plus tard tous les 4 ans.

(la date du renouvellement conseillé se trouve sur l'étiquette du produit/l'étui)

Nettoyage et entretien

► En cas de salissure, nettoyez soigneusement vos embouts personnalisés avec de

l'eau légèrement savonneuse.

► Certaines substances chimiques peuvent détériorer vos embouts personnalisés. Pour d'autres informations, veuillez contacter le fabricant.

► Informez-vous auprès de votre conseiller client sur les produits d'entretien spéciaux recommandés.

► Veuillez utiliser l'étui qui vous a été fourni pour conserver vos embouts personnalisés, avant et après l'emploi.

Avertissements

► EARWEAR ADAPT n'est pas une protection auditive et ne vous protège pas contre le bruit ambiant nocif !

► Évitez d'écouter de la musique avec des écouteurs à un volume élevé pendant de lon-

gues durées. Assurez-vous que le niveau sonore est adéquat et ne nuit pas à vos oreilles.

► Lorsque vous écoutez de la musique, faites régulièrement des pauses pour octroyer du répit à vos oreilles et éviter les dommages éventuels.

► Veuillez noter que EARWEAR ADAPT restreint votre perception des dangers potentiels et des signaux d'avertissement. Soyez donc particulièrement attentif-ve aux dangers potentiels et aux avertissements de danger dans votre environnement lorsque vous l'utilisez.

► En cas de pression et de sensation de pression, veuillez vérifier le positionnement de vos embouts.

► En cas de réactions allergiques telles que

rougeurs de la peau, démangeaisons etc., veuillez ne pas continuer à utiliser EARWEAR ADAPT et consultez un médecin spécialisé pour en rechercher la cause !

► Tenir hors de portée des enfants en bas âge, car il y a danger d'étouffement !

► Enlever un embout auriculaire du conduit auditif de manière soudaine ou rapide peut endommager le tympan.

► Ne retirez pas les embouts en tirant sur la lanière ou le fil !

► En cas de blessure à l'oreille, ne plus utiliser l'embout auriculaire ; nous vous recommandons de vous rendre chez le médecin spécialisé le plus proche !

► Les embouts EARWEAR ADAPT ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque que

la lanière ou le fil se coince ou s'arrache durant le port.

Services et garantie

Si vous devez faire appel à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur avec votre facture. Les droits de garantie sont soumis aux réglementations légales. Sont exclus les dommages qui résultent d'une utilisation non conforme et du non-respect des consignes d'entretien.

Spoštovana stranka,

prosimo, da pred prvo uporabo slušalke natančno preberete te informacije o uporabi in jih shranite v priloženi škatli za shranjevanje. Zagotavlja pomembne informacije o vašem izdelku.

Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko povzroči resne poškodbe sluha.

Ne pozabite, da je zdravje vaših ušes zelo pomembno. Zaščitite svoj sluh z razumno uporabo slušalk in omejitev glasnosti na varno raven.

Splošno

- ▶ ADAPT je individualno nameščen ušesni čep za večkratno uporabo iz prožnega, koži prijaznega materiala.
- ▶ Desna slušalka je označena s piko za razlikovanje ob straneh.
- ▶ Pozor: Pri uporabi ADAPT je lahko akustična percepcija okolja omejena.

Vstavljanje

Primate slušalke s palcem in kazalcem ter vstavite zatič slušalke v ušesni kanal. Ušesno mečico nežno povlecite navzdol in po potrebi slušalko potisnite v ušesni kanal ter jo rahlo zasukajte. Sledite naravnim obrisom svojega ušesa. Nežno pritisnite ušesni nastavek, da se udobno prilega vašemu ušesu.

Odstranjevanje

S palcem in kazalcem primite ušesni nastavek in ga nežno potegnite, da ga sprostite iz ušesnega kanala. Nato odstranite ušesni vložek iz ušesa.

Funkcionalna okvara

- ▶ Redno preverjajte EARWEAR ADAPT glede poškodb. Z veseljem bomo preverili, ali se vaš ušesni vložek, narejen po meri, še vedno popolnoma prilega.
- ▶ Ne uporabljajte jih, če so poškodovani. Za zamenjavo se obrnite na proizvajalca.
- ▶ Da bi lahko zagotovili dobro udobje pri nošenju/dobro zvočno izkušnjo, priporočamo zamenjavo ušesnih nastavkov po meri z novimi najkasneje po 4 letih.

(Priporočeni datum zamenjave na etiketi izdelka/ohišju)

Čiščenje in nega

- ▶ Ko je ušesna slušalka umazana, jo previdno očistite z blago milnico.
- ▶ Nekateri kemični snovi lahko negativno vplivajo na slušalko, izdelane po meri. Za več informacij stopite v stik s proizvajalcem.
- ▶ Vprašajte svojega svetovalca za stranke o posebej priporočenih izdelkih za nego.
- ▶ Za shranjevanje pred in po uporabi uporabite priloženo torbico.

Opozorila

- ▶ EARWEAR ADAPT ni zaščita sluha in ne nudi nobene zaščite pred škodljivim hrupom iz okolja!

- ▶ Izogibajte se dolgotrajnemu poslušanju glasbe s slušalkami pri visoki glasnosti. Prepričajte se, da so ravni glasnosti razumne, da zaščitite svoja ušesa.
- ▶ Med poslušanjem glasbe si vzemite redne odmore, da si spočijete ušesa in preprečite morebitne poškodbe.
- ▶ Upoštevajte, da bo EARWEAR ADAPT vplival na vaše zaznavanje potencialnih nevarnosti ali opozorilnih signalov. Zato bodite pri uporabi še posebej pozorni na možne nevarnosti in opozorila o nevarnostih v vašem okolju.
- ▶ Če obstajajo točke pritiska in občutek pritiska, preverite prileganje slušalk.
- ▶ Če se pojavijo alergijske reakcije, kot so pordelost kože, srbenje itd., prenehajte z

- uporabo EARWEAR ADAPT in razjasnite vzrok pri specialistu!
- ▶ Hraniti izven dosega majhnih otrok, ker obstaja nevarnost zadušitve!
 - ▶ Nenadna ali hitra odstranitev ušesnega nastavka iz sluhovoda lahko poškoduje bobnič.
 - ▶ Ne odstranjujte slušalk z vlečenjem za vrvico ali kabel!
 - ▶ V primeru poškodbe ušesa slušalke ne smete več uporabljati in se priporoča posvet z najbližjim specialistom!
 - ▶ EARWEAR ADAPT ne smete nositi, če obstaja nevarnost, da bi se vrvica ali kabel med nošenjem zataknila ali potegnila.

Servis in garancija

V primeru uveljavljanja garancije se obrnite na prodajalca z računom. Garancijski zahtevki temeljijo na zakonskih določilih. Izključene so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe in neupoštevanja navodil za nego.

Poštovani kupci,

molimo vas da prije prve primjene ušnog umetka pročitate ove upute za upotrebu i da ih čuvate u dobivenoj kutiji za pohranu. U njima su sadržane važne informacije o vašem proizvodu.

Slušanje preglasne glazbe u slušalicama može dovesti do teških oštećenja sluha. Imajte na umu da je zdravlje vaših uši vrlo važno. Zaštitite sluh pametnim korištenjem slušalica, a glasnoću smanjite na sigurnu razinu.

Općenito

- ▶ ADAPT je višekratni individualno prilagođeni čepić za uši od prilagodljiva materijala koji je nježan za kožu.
- ▶ Radi razlikovanja strana desni je ušni umetak obilježen točkom.
- ▶ Pozor: kod upotrebe proizvoda ADAPT akustična percepcija okoline može biti smanjena.

Umetanje

Palcem i kažiprstom obuhvatite slušalicu te produžetak ušnog umetka smjestite u ušni kanal. Ušnu resicu oprezno povucite prema dolje, a ušni umetak po potrebi laganim pritiskom i uz laganu rotaciju pritisnite u ušni kanal. Pritom slijedite prirodni

oblik uha. Lagano pritisnite ušni umetak kako biste provjerili je li ugodno smješten u uhu.

Uklanjanje

Palcem i kažiprstom obuhvatite ušni umetak i lagano ga povucite kako biste ga oslobodili iz ušnog kanala. Zatim izvadite ušni umetak iz uha.

Slabljenje učinkovitosti

- ▶ Redovno provjeravajte postoje li na vašem umetku EARWEAR ADAPT oštećenja. Rado ćemo provjeriti pristaje li vaš ušni umetak izrađen po mjeri još uvijek savršeno.
- ▶ Nemojte upotrebljavati proizvod ako je

oštećen. Za zamjenu obratite se proizvođaču.

► Za dobru udobnost nošenja i dobar doživljaj zvuka preporučujemo da ušne umetke izrađene po mjeri nakon najviše 4 godine zamijenite novima.

(Datum preporučene zamjene otisnut je na etiketi proizvoda / futroli)

Čišćenje i održavanje

► Ušne umetke izrađene po mjeri pažljivo čistite vodom s blagom koncentracijom sapuna.

► Određene kemijske tvari mogu utjecati negativno na ušne umetke izrađene po mjeri. Za više informacija obratite se proizvođaču.

► Raspitajte se kod svojeg savjetnika o sredstvima za njegu koja se posebno preporučuju.

► Molimo vas da za čuvanje prije i nakon upotrebe upotrebljavate dobivenu futrolu.

Upozorenja

► EARWEAR ADAPT nije zaštita sluha i ne štiti od štetne buke okoline!

► Izbjegavajte dulja razdoblja slušanja glasne glazbe u slušalicama. Provjerite odgovara li razina glasnoće zaštiti vaših uši.

► Tijekom slušanja glazbe činite redovno stanke kako biste ušima omogućili odmor i spriječili moguća oštećenja.

► Molimo uzmite u obzir da EARWEAR

ADAPT smanjuje vašu percepciju mogućih opasnosti ili signala upozorenja. Stoga tijekom upotrebe osobito pazite na opasnosti i znakove opasnosti u svojoj okolini.

► U slučaju mjesta ili osjećaja pritiska provjerite kako ušni umetci pristaju.

► U slučaju alergijskih reakcija poput crvenila, svrbeža itd., molimo vas da ne nastavljate upotrebljavati EARWEAR ADAPT i da uzrok utvrdite s liječnikom specijalistom.

► Držite izvan dohvata mlađe djece jer postoji mogućnost od gutanja malih dijelova!

► Naglim ili brzim uklanjanjem ušnog ometka iz ušnog kanala možete oštetiti bubnjić.

► Ušne umetke nemojte uklanjati povlačenjem za vrpca za nošenje ili kabel!

► U slučaju ozljeda uha ušni se umetak više ne smije upotrebljavati te preporučujemo konzultaciju s liječnikom specijalistom!

► EARWEAR ADAPT ne biste trebali nositi ako postoji opasnost od toga da se vrpca za nošenje ili kabel tijekom nošenja zapleće ili otkine.

Servis i jamstvo

Molimo da se u slučaju koji podliježe jamstvu obratite s računom svojem trgovcu. Prava po jamstvu ravnaju se prema zakonskim propisima. Izuzeta su oštećenja nastala zbog nestručne upotrebe i nepridržavanja propisa o održavanju.

Poštovani kupci,

molimo vas da ove informacije o upotrebi pročitate pre prvog korišćenja slušalica i čuvajte ih u priloženoj kutiji za držanje. One vam pružaju važne informacije o vašem proizvodu.

Slušanje preglasne muzike sa slušalicama može izazvati ozbiljno oštećenje sluha. Imajte na umu da je zdravlje vaših ušiju od velike važnosti. Zaštitite svoj sluh razumnim korišćenjem slušalica i ograničavanjem jačine zvuka na bezbedan nivo.

Opšte napomene

- ▶ ADAPT je višekratni, individualno prilagođeni čep za uši, napravljen od fleksibilnog materijala pogodnog za kožu.
- ▶ Desna slušalica je označena tačkom, da bi se razlikovale strane.
- ▶ Pažnja: Kada koristite ADAPT, akustična percepcija zvukova iz okoline može biti ograničena.

Stavljanje slušalice

Uхватite slušalice između palca i kažiprsta i stavite čep slušalice u ušni kanal. Lagano povucite ušnu resicu nadole i, ako je potrebno, gurnite slušalicu u ušni kanal, lagano je uvrćući. Pratite pritom prirodne konture svog uha. Lagano pritisnite sluša-

licu, da biste se uverili da vam udobno leži u uhu.

Vađenje slušalice

Koristeći palac i kažiprst, uhvatite slušalicu i nežno je povucite da biste je izvukli iz ušnog kanala. Nakon toga izvadite je iz uha.

Funkcionalno oštećenje

- ▶ Redovno proveravajte da li vaš EARWEAR ADAPT ima oštećenja. Biće nam zadovoljstvo da proverimo da li se vaša slušalica po meri i dalje savršeno uklapa.
- ▶ Ne koristite je ako je oštećena. Za zame-nu kontaktirajte proizvođača.
- ▶ Da bi se mogla obezbediti dobra udobnost nošenja/dobar doživljaj zvuka, preporučujemo vam da svoje slušalice po

meri zamenite novima najkasnije nakon 4 godine.

(Preporučeni datum zamene nalazi se na etiketi/futroli proizvoda)

Čišćenje i nega

- ▶ Kada je prljava, pažljivo očistite slušalicu po meri blagom vodom sa sapunom.
 - ▶ Određene hemijske supstance mogu negativno da utiču na vaše slušalice po meri. Za ostale informacije kontaktirajte proizvođača.
 - ▶ Pitajte svog savetnika za kupce o posebno preporučenim proizvodima za negu.
 - ▶ Koristite isporučenu futrolu za čuvanje proizvoda pre i posle upotrebe.
- Poruke upozorenja

- ▶ EARWEAR ADAPT nije zaštita za sluh i ne nudi nikakvu zaštitu od štetne ambijentalne buke!
- ▶ Izbegavajte da slušate glasnu muziku sa slušalicama tokom dužeg vremenskog perioda. Uverite se da je jačina zvuka razumna, da biste zaštitili uši.
- ▶ Pravite redovne pauze u slušanju muzike da biste odmorili uši i izbegli moguća oštećenja.
- ▶ Imajte na umu da će EARWEAR ADAPT uticati na vašu percepciju potencijalnih opasnosti ili signala upozorenja. Zato obratite posebnu pažnju na moguće opasnosti i upozorenja u vašem okruženju kada koristite slušalice.
- ▶ Ako postoje tačke pritiska i osećaj priti-

ska, proverite naleganje slušalica.

- ▶ Ukoliko dođe do alergijskih reakcija, kao što su crvenilo kože, svrab i sl., prestajte da koristite EARWEAR ADAPT i razjasnite uzrok kod specijaliste!
- ▶ Držite proizvod dalje od male dece, jer postoji opasnost od gušenja!
- ▶ Iznenadno ili brzo uklanjanje slušalice iz ušnog kanala može oštetiti bubnu opnu.
- ▶ Nemojte vaditi slušalice povlačenjem trake za nošenje ili kabela!
- ▶ U slučaju povreda uha, slušalica se više ne sme koristiti i preporučujemo da konsultujete najbližeg specijalistu!
- ▶ EARWEAR ADAPT ne bi trebalo da se nosi ako postoji rizik da se traka ili kabl za-kače ili povuku tokom nošenja.

Servis i garancija

U slučaju reklamacije po osnovu garancije, obratite se svom prodavcu sa fakturom. Garancija se zasniva na zakonskim odredbama. Isključena su oštećenja koja su nastala zbog nepravilne upotrebe i nepoštovanja uputstava za negu.

Hersteller | Manufacturer

Neuroth International AG
Paula-Neuroth-Straße 1
A-8403 Lebring
office@neuroth.com

Accessories & replacement parts

Replacement earmould	2000000211
Large case	8000000672
Usage instructions	8000000828
Cleaning cloth	3000000002
Cerumen remover	3000000012

E A R W E A R

PROTECTION TO PERFECTION

8000000828