




E A R W E A R  
**DIVE**

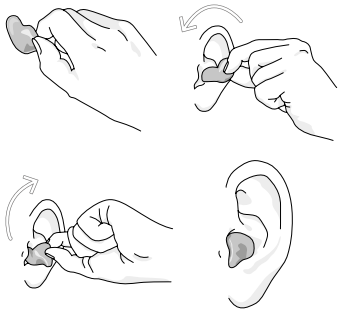

**Dear Customer,**

Please read this leaflet carefully before using your hearing protection Earwear DIVE for the first time and store it in your case. It provides important information on your product.

Earwear DIVE is highly comfortable to wear, and also ensures your comfort when diving, snorkelling, swimming or surfing.

**General information:**

- ▶ Earwear DIVE is a comfortable, customised earmould.
- ▶ It uses a small hole in the ear canal section to limit the amount of water entering your ear canal, which means the temperature in your ears stays at a comfortable warm temperature for longer. The slim design of Earwear EW 1521 also makes the product easy to wear under a diving hood if necessary.
- ▶ Earwear DIVE is customised for the ears of the purchaser and is therefore only suitable for use by him/her.
- ▶ When used correctly, Earwear DIVE will not impact on pressure equalisation.

**Use:**

Insertion: Take your Earwear DIVE between your thumb and index finger and insert it into your ear canal. Use gentle pressure to move it to its final position.

Removal: Hold the outer section with your thumb and index finger and pull carefully so that the earmould comes loose from the ear canal.

**Maintaining the functionality of your Earwear DIVE:**

- ▶ Check your Earwear DIVE regularly for any damage.
- ▶ Earwear DIVE should be checked in-ear by an expert on an annual basis, so as to ensure that they are fully effective.

► It is essential to ensure that your ear is free of earwax (cerumen). If it is not, the earwax may seal the aperture when you insert the earplug, and prevent you from equalising.

► We recommend that you replace your Earwear DIVE at least every four years.

**Cleaning and care:**

► Clean your Earwear DIVE after every use using soap and water to remove earwax (cerumen) and any other dirt, using a damp cloth or antibacterial wipes.

► Certain chemical substances can damage this product. Avoid contact with strong chemicals, cleaning agents or solvents.

► Your customer service associate will in-

form you about recommended care products.

► Please use the case provided to store your product.

**Warning and safety information:**

► Check the aperture of your Earwear EW 1521 before and after each use to ensure it is not blocked with cerumen, and if necessary clean it immediately.

**Caution:** If an aperture is blocked it will prevent you from being able to equalise.

► If you notice any pressure marks or experience any feeling of pressure, please check the fit of your earplug.

▶ Should you suffer any allergic reaction, such as red or itchy skin etc. please stop using your Earwear EW 1521 and seek medical advice about the cause of the problem.

▶ Keep away from toddlers. Risk of asphyxiation if swallowed.

▶ If you sustain an ear injury you should refrain from using your Earwear EW 1521 and we would recommend you seek medical advice.

▶ We recommend you complete an open water diving course before using the product underwater.

▶ We also advise you to have your ears cleaned by a medical professional before using Earwear DIVE.

▶ Should you encounter any problems with equalising, return slowly to the surface, making a safety stop if necessary. In this event, you should under no circumstances continue your dive or dive deeper.

▶ Contact with chemicals or alcohol can damage your earplugs. Additional information on this topic is available from the manufacturer on request.

▶ Earwear DIVE components may be damaged if they come into contact with sharp objects.

▶ The functionality of your earplugs may be impaired if these guidelines are not followed.

▶ Sudden or rapid removal of Earwear EW 1521 from your ear canal may damage

your eardrum.

► Please note that your Earwear DIVE may impede your perception of potential hazards and warning signals, so please pay special attention to your surroundings when using them.

**Service and warranty:**

Warranty claims shall be governed by statutory provisions. The warranty excludes all damage attributable to improper use, and non-compliance with the care instructions. In case of warranty claims please contact your customer service associate with your receipt.

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der ersten Anwendung Ihres Gehörschutzes Earwear DIVE genau durch und bewahren Sie sie im Etui auf. Sie liefert Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Produkt.

Earwear DIVE bietet hervorragenden Tragekomfort und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Tauchen, Schnorcheln, Schwimmen und auch Surfen.

### **Allgemeines:**

- ▶ Earwear DIVE ist eine individuell angepasste Komfort-Otoplastik für Ihre Ohren.
- ▶ Durch die kleine Bohrung im Gehörgangsteil Ihres Gehörschutzes wird der Wassereintritt in den Gehörgang reduziert, wodurch etwa die Temperatur im Ohr länger angenehm warm bleibt. Durch das dünne Design des Earwear DIVE ist es zudem problemlos möglich, diesen gegebenenfalls unter einer Tauchhaube zu tragen.
- ▶ Earwear DIVE wird individuell an die Ohren des Erwerbers angepasst und kann ihren Nutzen nur bei diesem entfalten.
- ▶ Bei korrekter Verwendung hat der Earwear DIVE keinen Einfluss auf den Druckausgleich.

### **Anwendung:**

Einsetzen: Nehmen Sie den Earwear DIVE zwischen Daumen und Zeigefinger und setzen Sie ihn in den Gehörgang ein. Bringen Sie ihn mit leichtem Druck in die Endposition.

Entnehmen: Greifen Sie mit Daumen und Zeigefinger an die äußere Form und ziehen Sie vorsichtig daran, damit sich die Otoplastik aus dem Gehörgang lockert.

### **Beeinträchtigung der Funktion Ihres Earwear DIVE:**

- ▶ Kontrollieren Sie Ihren Gehörschutz regelmäßig auf Beschädigungen.
- ▶ Der Earwear DIVE sollte jedes Jahr von einem Fachmann auf die korrekte Pass-

form im Ohr geprüft werden, damit sie ihren vollen Nutzen entfalten kann.

► Es ist unerlässlich, dass Ihr Ohr frei von Ohrenschmalz (Cerumen) ist. Beim Einsetzen kann dieses ansonsten die Öffnung verschließen und den Druckausgleich verhindern.

► Wir empfehlen generell, dass Sie den Earwear DIVE nach spätestens vier Jahren ersetzen.

#### **Reinigung und Pflege:**

► Reinigen Sie Ihren Earwear DIVE nach jeder Anwendung mit mildem Seifenwasser, um Ohrenschmalz (Cerumen) und andere Verunreinigungen zu entfernen. Der Gehörschutz kann mit einem feuchten Tuch oder antibakteriellen Reinigungstüchern

gesäubert werden.

► Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen Schaden nehmen. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Chemikalien, Putz- oder Lösungsmitteln.

► Informieren Sie sich bei Ihrem Kundenberater über speziell empfohlene Pflegeprodukte.

► Verwenden Sie bitte zur Aufbewahrung das mitgelieferte Etui.

#### **Warn- und Sicherheitshinweise:**

► Die Öffnung des Earwear DIVE ist vor und nach jeder Benutzung auf Verschluss mit Cerumen zu kontrollieren. Bei Bedarf ist diese umgehend zu reinigen.

**Achtung:** Eine verstopfte Öffnung beeinträchtigt die Durchführung eines Druck-



ausgleiches!

- ▶ Bei Druckstellen und Druckgefühl überprüfen Sie bitte den Sitz Ihres Produktes.
- ▶ Sollten allergische Reaktionen wie Hautrötungen, Jucken etc. auftreten, bitte den Gehörschutz nicht weiter verwenden und die Ursache mit einem Facharzt abklären.
- ▶ Von Kleinkindern fernhalten, da beim Verschlucken Erstickungsgefahr besteht.
- ▶ Bei Verletzungen im Ohr darf Earwear DIVE nicht mehr verwendet werden und es wird empfohlen, den nächsten Facharzt aufzusuchen.
- ▶ Für den Taucheinsatz (Scuba Diving) empfehlen wir die Absolvierung eines Open Water Diver-Kurses.
- ▶ Es wird dazu geraten, die Ohren vor der

geplanten Verwendung des Earwear DIVE von einem Facharzt reinigen zu lassen.

- ▶ Sollten bei der Durchführung des Druckausgleiches Probleme auftreten, kehren Sie langsam – gegebenenfalls nach Durchführung eines „Safety Stops“ – an die Wasseroberfläche zurück. Keinesfalls sollten Sie in diesem Fall den Tauchgang fortsetzen und in größere Tiefen abtauchen.
- ▶ Durch den Kontakt mit Chemikalien oder Alkohol kann das Produkt Schaden nehmen. Weitere Angaben können beim Hersteller angefordert werden.
- ▶ Die Bestandteile des Gehörschutzes können beschädigt werden, wenn sie in Kontakt zu scharfen Gegenständen geraten.
- ▶ Bei Nichtbefolgung der gegebenen

Empfehlungen kann die Funktion beeinträchtigt werden.

► Plötzliches oder schnelles Entfernen des Gehörschutzes aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen.

► Bitte beachten Sie, dass der Gehörschutz Earwear DIVE Ihre Wahrnehmung von möglichen Gefahren oder Warnsignalen beeinträchtigen kann. Achten Sie deshalb bei deren Verwendung besonders auf mögliche Gefahren und Gefahrenhinweise in Ihrem Umfeld.

### **Service und Gewährleistung:**

Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ausgenommen sind Schäden, die auf

unsachgemäßen Gebrauch und die Nichteinhaltung der Pflegevorschriften zurückzuführen sind. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte mit der Rechnung an Ihren Kundenberater.

---

### **Hersteller | Manufacturer**

Neuroth International AG  
Paula-Neuroth-Straße 1  
A-8403 Lebring  
office@neuroth.com

8000000010/Rev. 3, August 2023

E A R W E A R

PROTECTION TO PERFECTION

8000000010